

LiNA PowerBlade™

Multifunktionale Einweg-Zange für die bipolare Koagulation und zum Schneiden



LiNA PowerBlade™



Funktionalität. Ein sauberer und präziser Schnitt.

Die bipolare Elektrode/Klinge wird nie stumpf
Das patentierte Design ermöglicht die bipolare Durchtrennung von Gewebe. Das Schneiden wird mithilfe bipolarer Energie durchgeführt, **nicht als mechanische** Aktion einer Messerklinge.

Zur Verwendung mit allen standardmäßigen bipolaren Elektrochirurgiegeräten.


Breites Spektrum an Größen, Längen und Klemmbackengeometrien.



5,4 mm and 10 mm – Gerade Klemmbacken



5,4 mm – Gebogene Klemmbacken

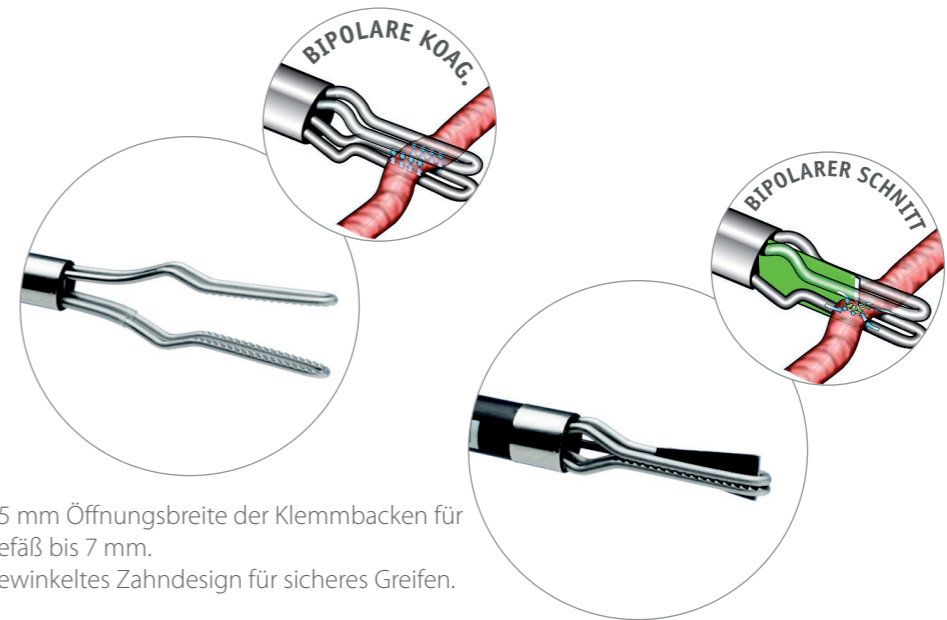

8,5 mm Öffnungsbreite der Klemmbacken für Gefäß bis 7 mm.
Gewinkelt Zahndesign für sicheres Greifen.

Schneidelektrode/-klinge für bipolares Schneiden.

Vielseitigkeit. Die LiNA PowerBlade™ kann zusammen mit sämtlichen standardmäßigen bipolaren Elektrochirurgiegeräten verwendet werden. Die Verwendung der LiNA PowerBlade™ erfordert keine größere Geldinvestition.

Breites Spektrum an Funktionen

Die LiNA PowerBlade™ ist eine bipolare Koagulations- und Schneidzange für verbesserte Techniken bei laparoskopischen Eingriffen. Als Komplettinstrument eignet sich die LiNA PowerBlade™ ideal für viele komplexe und zeitaufwändige Eingriffe:

- Greifen
- Trennen
- Koagulieren
- Schneiden

Sicherheit. Einzigartige Schneidfunktion mit bipolaren Energieklingen

Wenn die Schneidelektrode zur Durchtrennung verwendet wird, fließt der bipolare Strom automatisch aus den Klemmbacken.

Der elektrochirurgische Strom fließt durch das Gewebe zwischen der Schneidelektrode/-klinge und den Klemmbacken.


Der bipolare elektrochirurgische Schnitt mit Koagulation entlang der Oberfläche einer Schneidelektrode/-klinge verringert im Vergleich zu einem herkömmlichen Messerklingeninstrument die Blutung.



LiNA PowerBlade™

Verfügbar mit drei verschiedenen Steckern:

- 1) EURO-Anschluss
- 2) 2 x 4 mm Stifte (Bananenstecker)
- 3) 2 x 4 mm Stifte mit festem Abstand von 29 mm

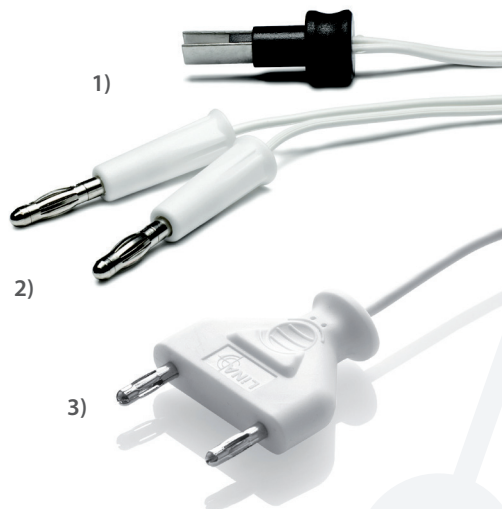

LiNA PowerBlade™



Bestellinformationen:

Produktcode	LiNA PowerBlade™ – Nur Einwegprodukt. – Einzel verpackt – Steril	UOM
5005-E	Bipolare Schneid- und Koagulationszange, gerade Klemmbacken, Ø 5,4 mm, 330 mm Arbeitslänge, 3 m Kabel, EURO-Stecker	5er-Packung
5005-E-160	Bipolare Schneid- und Koagulationszange, gerade Klemmbacken, Ø 5,4 mm, 185 mm Arbeitslänge, 3 m Kabel, EURO-Stecker	5er-Packung
5010-E	Bipolare Schneid- und Koagulationszange, gerade Klemmbacken, Ø 10 mm, 330 mm Arbeitslänge, 3 m Kabel, EURO-Stecker	5er-Packung
5010-E-160	Bipolare Schneid- und Koagulationszange, gerade Klemmbacken, Ø 10 mm, 185 mm Arbeitslänge, 3 m Kabel, EURO-Stecker	5er-Packung
5005-E-C	Bipolare Schneid- und Koagulationszange, gebogene Klemmbacken, Ø 5,4 mm, 330 mm Arbeitslänge, 3 m Kabel, EURO-Stecker	5er-Packung
5005-E-C-160	Bipolare Schneid- und Koagulationszange, gebogene Klemmbacken, Ø 5,4 mm, 185 mm Arbeitslänge, 3 m Kabel, EURO-Stecker	5er-Packung
5005	Bipolare Schneid- und Koagulationszange, gerade Klemmbacken, Ø 5,4 mm, 330 mm Arbeitslänge, 3 m Kabel, 2 x 4 mm Stifte	5er-Packung
5005-160	Bipolare Schneid- und Koagulationszange, gerade Klemmbacken, Ø 5,4 mm, 185 mm Arbeitslänge, 3 m Kabel, 2 x 4 mm Stifte	5er-Packung
5010	Bipolare Schneid- und Koagulationszange, gerade Klemmbacken, Ø 10 mm, 330 mm Arbeitslänge, 3 m Kabel, 2 x 4 mm Stifte	5er-Packung
5010-160	Bipolare Schneid- und Koagulationszange, gerade Klemmbacken, Ø 10 mm, 185 mm Arbeitslänge, 3 m Kabel, 2 x 4 mm Stifte	5er-Packung
5005-C	Bipolare Schneid- und Koagulationszange, gebogene Klemmbacken, Ø 5,4 mm, 330 mm Arbeitslänge, 3 m Kabel, 2 x 4 mm Stifte	5er-Packung
5005-C-160	Bipolare Schneid- und Koagulationszange, gebogene Klemmbacken, Ø 5,4 mm, 185 mm Arbeitslänge, 3 m Kabel, 2 x 4 mm Stifte	5er-Packung
5005-Y	Bipolare Schneid- und Koagulationszange, gerade Klemmbacken, Ø 5,4 mm, 330 mm Arbeitslänge, 3 m Kabel, 2 x 4 mm Stifte mit festem Abstand von 29 mm	5er-Packung
5005-Y-160	Bipolare Schneid- und Koagulationszange, gerade Klemmbacken, Ø 5,4 mm, 185 mm Arbeitslänge, 3 m Kabel, 2 x 4 mm Stifte mit festem Abstand von 29 mm	5er-Packung
5010-Y	Bipolare Schneid- und Koagulationszange, gerade Klemmbacken, Ø 10 mm, 330 mm Arbeitslänge, 3 m Kabel, 2 x 4 mm Stifte mit festem Abstand von 29 mm	5er-Packung
5010-Y-160	Bipolare Schneid- und Koagulationszange, gerade Klemmbacken, Ø 10 mm, 185 mm Arbeitslänge, 3 m Kabel, 2 x 4 mm Stifte mit festem Abstand von 29 mm	5er-Packung
5005-Y-C	Bipolare Schneid- und Koagulationszange, gebogene Klemmbacken, Ø 5,4 mm, 330 mm Arbeitslänge, 3 m Kabel, 2 x 4 mm Stifte mit festem Abstand von 29 mm	5er-Packung
5005-Y-C-160	Bipolare Schneid- und Koagulationszange, gebogene Klemmbacken, Ø 5,4 mm, 185 mm Arbeitslänge, 3 m Kabel, 2 x 4 mm Stifte mit festem Abstand von 29 mm	5er-Packung
5005-Y-C-420	Bipolare Schneid- und Koagulationszange, gebogene Klemmbacken, Ø 5,4 mm, 445 mm Arbeitslänge, 3 m Kabel, 2 x 4 mm Stifte mit festem Abstand von 29 mm	5er-Packung

©2022 LiNA Medical ApS. Alle Rechte vorbehalten.

LiNA ist ein in der EU, den USA und China eingetragenes Warenzeichen von LiNA Medical.

LiNA Medical ApS

• Formervangen 5
DK-2600 Glostrup
Denmark

• Tel.: +45 43 29 66 66
Fax: +45 43 29 66 99
info@lina-medical.com

• www.lina-medical.com
CVR: 10054974

EN ISO 13485:2016
Qualitätsmanagement-
system

